

**l'EXCELLENCE du nettoyage
par ULTRASONS**



***Y*SONIC**
GAMASONIC - France

Laveur Automatique SNC SLIDE 30K7

Performance - Efficacité - Sécurité



Photo non contractuelle

Version sous plan de travail (tiroir électrique)

**Le Laveur automatique SNC Slide 30K7 bénéficie de
la technologie Ultrasonore GAMASONIC pour
Nettoyer - Désinfecter - Rincer - Sécher
l'instrumentation réutilisable au cabinet dentaire**



FONCTIONNEMENT

OUVERTURE / FERMETURE DU TIROIR

L'ouverture / Fermeture du tiroir sur le **SNC Slide 30K7** s'effectue de manière automatisée via une impulsion sur l'interrupteur « *Ouverture/ Fermeture* ».

PRÉ-DÉSINFECTION « PANIER / CASSETTES »

- ▶ Positionner les paniers adaptés à l'instrumentation dans l'appareil
 - 2 Paniers P12 ou 4 Paniers P3 (instrumentation vrac)
 - 2 Paniers PC17 (cassettes de chirurgie)
- ▶ Lancer le cycle de Pré-Désinfection Panier / Cassettes
 - Pré-Désinfection Panier = 9 cm (Hauteur d'eau)
 - Pré-Désinfection Cassettes = 20 cm (Hauteur d'eau)

▶ Positionner l'instrumentation souillée dans le panier positionné en effectuant des phases d'Ouverture / Fermeture du tiroir.

N.B. : Une fois les paniers pleins, lancer le Cycle Automatique Panier ou Cassettes

CYCLE AUTOMATIQUE « PANIER / CASSETTES »

- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons
- ▶ Nettoyage sous Ultrasons avec le produit PROCLEAN
- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons
- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons avec le produit DPH 21
- ▶ Séchage par air chaud

INSTALLATION DE L'APPAREIL (voir documentation technique)

L'appareil SNC Slide 30K7 s'installe sous un plan de travail dans un module de meuble de 60 cm de largeur.


Son fonctionnement nécessite une alimentation électrique de 220V avec terre, une vidange type « machine à laver », une arrivée d'eau du réseau bactériologiquement contrôlée et filtrée raccordée sur un robinet type machine à laver (20/27).

Les bidons de produits sont raccordés et entreposés dans le module de meuble situé à droite (de préférence).

Le niveau bas des bidons est visualisé sur le tableau de commande.

L'appareil SNC Slide 30K7 ne se substitue pas à la stérilisation des instruments après leurs nettoyage.

**EN FIN DE MISE EN SERVICE,
LAISSER L'APPAREIL EN ÉTAT DE PROPRETÉ
(cuve rincée et essuyée)**

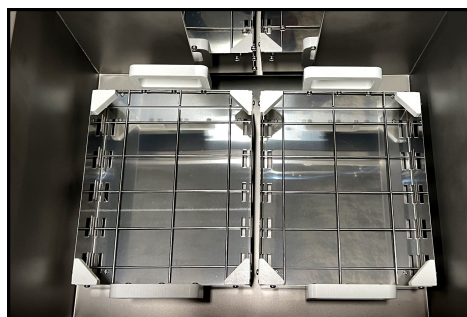

Panier P12 (x2)

(Pour instrumentation de type "VRAC")

Capacité ~ 15 patients



Panier P3 (x4)

(Pour instrumentation de type "VRAC")



Panier PC17 (x2)

(Pour Cassettes)

Capacité :

- 48 Cassettes (4 instruments)
- 24 Cassettes (10 instruments)
- 12 Cassettes (20 instruments)