

I'EXCELLENCE du SECHAGE



YSONIC

GAMASONIC - France

CYCLONIC

Gamme de SECHEURS pour INSTRUMENTATION



LE SECHAGE DE L'INSTRUMENTATION :
UNE PHASE OBLIGATOIRE DE L'ASEPSIE

Dispositif Médical **CE**

- ▶ Différentes tailles de cuves
- ▶ Différentes configurations



GS17-E

▶ Modèle Encastrable



GS17-T

▶ Modèle Table



GS17-M

▶ Modèle Meuble

Les appareils de la gamme CYCLONIC sont conçus pour le séchage de l'instrumentation.

- Sèche très rapidement l'instrumentation médico-chirurgicale venant d'être nettoyées et rincée.

- Plusieurs Modèles disponibles : **Encastrable, Table ou Meuble**

Encastrable = à encastrer dans un plan de travail / Table = à poser sur un plan de travail / Meuble = à intégrer dans une niche

- Plusieurs tailles de cuves : **3L, 12L, 17L, 17L-K7, 30L, 30L-K7** ("K7" = Versions dédiées aux cassettes)

- Version avec Régulateur de Température - Version « R » : 2000W de chauffage, Montée en température plus rapide, Précision 0,1°C

- Une gamme complète de paniers adaptés pour répondre à vos applications.

SPECIFICITES / INSTALLATION APPAREIL :

(Voir manuel utilisateur)

Alimentation électrique : 230V - 50 Hz + Prise Terre

Minuterie : 0 - 15 minutes

Changer le filtre à air au minimum tous les 3 mois.

Utiliser un panier pour déposer l'instrumentation à sécher

MODELE	Puissance séchage (Watts)	DIMENSIONS Intérieur Cuve (mm)	DIMENSIONS Hors tout (mm)	VOLUME Cuve
GS3	500 W.	Non applicable	510x270x132	3,5 L.
GS12-E GS12-T GS12-M	1000 W.	330x295x150	460x445x280 460x445x350 516x480x378	13L.
GS17-E GS17-T GS17-M	1000 W.	330x295x200	460x445x330 460x445x350 516x480x378	17L.
GS30-E GS30-T GS30-M	1000 W.	500x295x200	650x410x330 650x410x350 595x480x378	28L.
GSR17-E GSR17-T GSR17-M	2000W.	330x295x200	460x445x330 460x445x350 516x480x378	17L.
GSR30-E GSR30-T	2000W.	500x295x200	650x410x330 650x410x350	28L
GS30-EK7	2000W.	495x320x260	680x440x405	40L.

« E » : Modèle Encastrable / « T » : Modèle de Table / « M » : Modèle Meuble

« R » : Version avec Régulateur de température



Modèle Table avec Régulateur de température



Modèle Encastrable




Modèle Meuble

GAMME D'USTENSILES :

Large choix de Paniers pour conditionner l'instrumentation suivant vos applications.

- Conditionnement classique : Paniers « VRAC » avec grille de fond de panier
P3+GP3 / P12+GP12 / P30+GP30

- Conditionnement en cassette : Panier Porte-Cassette
PC17

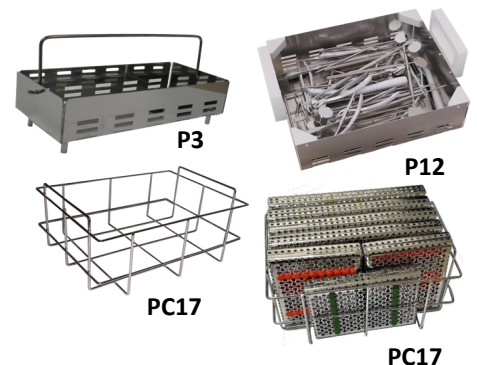

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

L'appareil CYCLONIC est un dispositif médical pour le séchage de l'instrumentation médico-chirurgicale à usage professionnel (Professionnel de santé).

Ne jamais poser les instruments directement au fond de la cuve. Utiliser des paniers adaptés.

Il est normal qu'un dépôt d'eau subsiste au fond de la cuve en fin de séchage.

Lire la documentation technique de l'appareil avant toute utilisation.